



ES Manual de instrucciones  
EN Instruction manual  
FR Mode d'emploi  
DE Bedienungsanleitung  
IT Manuale d'istruzioni

**P03**

## **MOVE**

PEELING FACIAL PORTÁTIL  
PORTABLE SKIN SCRUBBER  
PEELING PORTABLE  
TRAGBARER SPATEL  
PEELING FACIALE PORTATILE



ES



EN



FR



DE



IT

## USO DEL MANUAL

Es muy importante que lea detenidamente este manual y lo guarde en lugar Seguro para futura utilización. Contiene información importante sobre cómo utilizar el aparato.

Puede consultar un profesional para que lo guíe y asegurarse de que está utilizando el aparato correctamente.

## ADVERTENCIAS

- Bajo ningún concepto intente abrir o inspeccionar los componentes internos del aparato. Si una inspección fuese necesaria, contacte con su distribuidor o con un técnico autorizado.
- Nunca utilice el aparato en lugares con altos niveles de humedad o con escasa ventilación para evitar daños a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el aparato en el exterior: la exposición a elementos externos podría dañarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite un cable nuevo a un técnico o profesional y sustitúyalo para evitar riesgos. Contacte con el distribuidor en caso necesario.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:

- Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

## RECICLAJE




Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

## WEELKOME!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

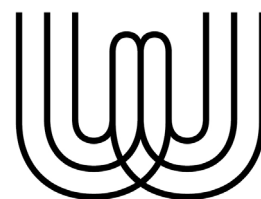

**weelko**  
the wellness  
company

## CONTENIDO

A la llegada del paquete, asegúrese que el contenido esté presente:

- Espátula de exfoliación
- Cable de alimentación



## INFORMACIÓN GENERAL

La Espátula Portátil Exfoliante es un instrumento de belleza diseñado para mejorar los problemas de piel. A través de una vibración ultrasónica con una frecuencia de 25-27 KHz elimina toxinas, puntos negros, acné y partículas de piel muerta.

Es un dispositivo fácil de usar. Ayuda a mejorar de forma eficaz una gran variedad de problemas de piel. Este aparato trabaja a baja tensión, lo que permite reducir la melanina, esterilizar la piel, reducir el tamaño de los poros, limpiar los poros de forma profunda, reducir arrugas y blanquear la piel.

Colocar la espátula a 45 grados con el objetivo de acelerar el metabolismo de las células epidérmicas y mejorar la renovación de las células que envejecen mientras que suaviza la queratina y restablece la elasticidad de la piel para dotarla de una apariencia firme, lisa y delicada.

## FUNCIONES

1. Tratar el envejecimiento de la piel, eliminar la suciedad y el exceso de grasa de los poros.
2. Revitalizar la piel y mejorar su textura.
3. Limpiar de forma profunda y aclarar la piel sin dolor.
4. Diluir la pigmentación. Es ideal para pieles con acné.
5. Reducir el tamaño de los poros.
6. Blanquear y hacer brillar la piel.
7. Suavizar las arrugas. Aumentar la elasticidad de la piel.
8. Dispone de un temporizador digital para 15 de minutos de tratamiento. El dispositivo se para automáticamente cuando finaliza el tiempo seleccionado.
9. Dispositivo portátil.

## DESCRIPCIÓN PRODUCTO



## INSTRUCCIONES DE USO






1. Enchufe el cable y conecte el adaptador a la espátula.
2. Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado (la onda continua y la intensidad más baja están configuradas por defecto).
3. Seleccione el tipo de onda más indicada para cada tratamiento. Existen tres tipos de onda: la pulsada, la continua y la combinada (combinación de onda continua y pulsada). Cuando se trabaje en onda continua, el LED permanecerá encendido. Cuando se trabaje en onda pulsada, el LED parpadeará intermitentemente. Cuando se trabaje en onda combinada, se alternará el LED encendido permanentemente con un parpadeo intermitente.

Puede cambiar el tipo de onda para adaptarla a cada tratamiento. El LED y su color cambian en función de la intensidad seleccionada, así, el LED indica la intensidad y el parpadeo indica el tipo de onda utilizado.

4. Ajuste el nivel de intensidad según conveniente. Existen tres niveles de intensidad: baja, mediana y fuerte. La intensidad baja está seleccionada por defecto.
5. La espátula lleva un tiempo de trabajo programado de 15 minutos. Transcurrido este tiempo emitirá un zumbido y se apagará automáticamente.

1. Encienda la espátula. El LED se iluminará y la espátula empezará a trabajar. El dispositivo está configurado por defecto con la onda continua y la intensidad más baja.
2. Ajuste el tipo de onda y la intensidad según el tipo de tratamiento. La onda combinada es ideal para pieles sensibles.
3. Limpie la zona a tratar con una loción.
4. Coloque la espátula sobre la piel con una inclinación de 45 grados, como se muestra en las siguientes imágenes. Desplace la espátula hacia delante de forma profunda para limpiar la zona a tratar. Seleccione la intensidad según las características del tratamiento. (Nota: limpie la piel y la espátula con agua limpia. Mantenga la piel del paciente húmeda durante todo el tratamiento.)

\*\*Utilice la espátula como se muestra en las imágenes A, B y C

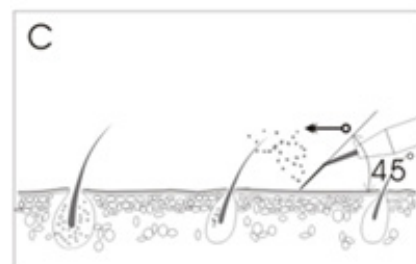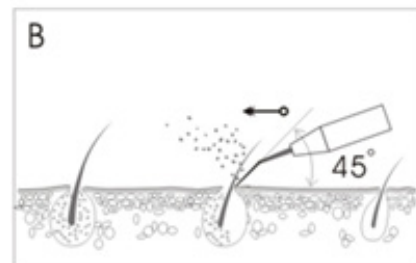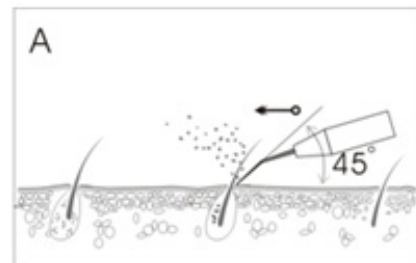

A. Eliminar el acné sin dolor. Una vibración ultrasónica atomiza el acné que se encuentra en los poros en muy poco tiempo. Así, el acné se elimina al limpiar la piel.

B. Eliminar rojeces. La vibración ultrasónica, con una potencia de 25K, elimina rojeces y residuos de productos cosméticos.

C. Limpiar la piel. La espátula limpia la suciedad de la superficie de la piel y mejora el envejecimiento de la piel. A través de la vibración, el efecto de limpieza es claramente visible.

5. Limpie la piel con agua después del tratamiento.

6. Limpie la espátula y esterilícela con alcohol.

## NOTAS

1. Es ideal para pacientes con piel seca o grasa. La piel se revigora después del tratamiento.

2. Se debe aplicar agua, una loción o gel antes del tratamiento ultrasónico.

3. Para limpiar la piel o tratar el envejecimiento de la piel, la onda continua es la mejor opción. La onda pulsada es perfecta para hacer un masaje en la piel y suavizar las arrugas.

4. Guarde la espátula limpia y esterilícela antes del siguiente uso.

5. No utilice la espátula alrededor de los ojos ni sobre heridas.

6. No trabaje durante demasiado tiempo la misma zona para evitar dañar la piel. La espátula se debe mover constantemente.

7. No utilice la espátula si está averiada o deformada.

8. Trate la piel de forma delicada y trabaje con la espátula inclinada 45 grados respecto a la piel.

9. Cuando la espátula está trabajando, chirría un poco. Este chirrido es debido a la frecuencia de vibración.

10. No utilice este dispositivo en niños, mujeres embarazadas o en personas con alguna psicopatía.

11. No utilice el dispositivo si el cable está roto o si el producto se ha mojado. En este caso, deberá devolverse al fabricante para ser reparado y revisado.

12. No utilice el dispositivo al aire libre.

13. No utilice el dispositivo en ambientes húmedos, como cuartos de baño.

14. No utilice el dispositivo con otro cable, los parámetros podrían no ser compatibles.

15. No utilice el dispositivo en pacientes con enfermedades de piel o que sean sensibles a la estimulación ultrasónica.

16. Guarde el dispositivo apagado si no va a utilizarlo.

17. Si el cable está estropeado, contacte con el distribuidor para sustituirlo. Para evitar accidentes, no intente reparar nada usted mismo.

---

## USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

---

## WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
  - Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
  - Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
  - If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.
- 

## EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

---

## RECYCLING



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

---

## WELCOME!

Thank you very much for your purchase. Please read carefully the instructions before using the device. We accept no responsibility for damages caused by misuse.

The company reserves the right to amend the details of the devices with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.





## CONTENT

On arrival of the beauty bed, check the presence of the following items:

- Ultrasound peeling spatula
- Power cord



## GENERAL INFORMATION

The Portable Skin Scrubber is a beauty instrument designed to improve skin problems. It uses an ultrasonic vibration with a frequency of 25-27 KHz, which removes toxins, blackheads, acne and dead skin particles.

It is well recognized by customers that this is an easy-to-use instrument which clearly improves a wide variety of skin problems. It works on low voltage which allows to reduce melanin and pore size, helps skin sterilization, pore deep cleansing, helps reduce wrinkles and whitens the skin.

A 45-degree angle operation should be adopted to accelerate the metabolism of epidermic cells and enhance the shedding of the ageing cells, while softening keratin and restoring the skin elasticity in order to give the skin a firm, smooth and delicate appearance.

## FUNCTIONS

1. Treats skin ageing, removes the excess of fat and the dirt hidden in skin pores.
2. Invigorates skin and improves its appearance.
3. Cleans skin deeply and clarifies the skin without pain.
4. Dilutes pigmentation. It's ideal for acne-prone skins.
5. Reduces the pore size.
6. Whitens the skin and makes it shine.
7. Smooths wrinkles. Increases the elasticity of the skin.
8. Digital timer for 15-minute treatment. The device stops automatically after the selected time is over.
9. Portable instrument.

## PRODUCT DESCRIPTION





## Operating instructions

1. Plug the power cable into a wall socket and plug the adapter into the spatula.
2. Press the On/Off button to turn the device on. When you turn on the instrument, the continuous wave and the lowest power are selected by default.
3. Choose the most appropriate wave for each treatment. There are three types of waves: pulsed wave, continuous wave and combined wave (it combines the pulsed and continuous waves). If the continuous wave is chosen, the indicator will not change. If the pulsed wave is chosen, the indicator will flash. If the combined wave is chosen, the indicator will light during one second and then it will flash. The type of wave can be changed depending on the treatment. The indicator and its color change depending on the selected power, so the indicator shows the power and the flashing shows the type of wave.
4. Adjust the intensity accordingly. There are three power levels: low, middle and high. Low power is established by default.
5. The treatment time by default is 15 minutes. The device will beep after the selected time is over and it will switch off automatically after this period of time.


1. Turn the device on. The indicator will light up and the spatula will start working. The continuous wave and the lowest power are selected by default.

2. Adjust the type of wave and the power according to the type of treatment to be made. The combined wave is ideal for sensitive skins.

3. Clean the area to be treated with a lotion.

4. Place the spatula on the skin with an inclination of 45 degrees, as shown in the pictures below. Move the spatula forward deeply to clean the area to be treated. Choose the power according to the characteristics of the treatment. (Note: Clean the skin and the spatula with clean water. Keep the skin moistened during the treatment.)

\*\*Please use the spatula as shown in pictures A, B and C.

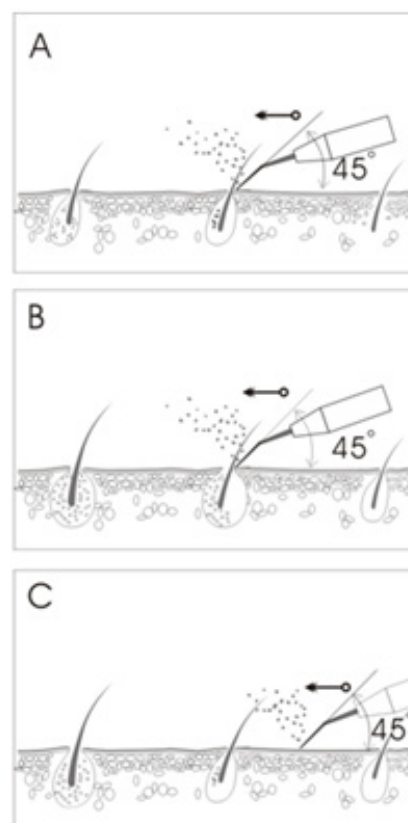



---

## INSTRUCTIONS

- A. Acne removal without pain. The acne on the skin is atomized by ultrasonic vibrations in a very short time. So acne can be removed when cleaning the skin.
- B. Redness removal. Redness and makeup residues are removed by ultrasonic vibration at a frequency of 25K.
- C. Skin cleaning. The spatula is used to clean dirt from the skin surface and to improve skin ageing. By means of its effective vibration, cleaning effects are really visible.
5. Clean the skin with water after the treatment.
6. Clean the spatula and sterilize it with alcohol.

---

## NOTES

1. It is ideal for patients with dry or oily skin. The skin should be revigorated after the treatment.
2. Please apply water, a lotion or gel on the skin before the ultrasonic treatment.
3. The continuous wave is the best option to clean the skin or treat skin ageing. Pulsed wave is perfect for massaging the skin and smoothing wrinkles.
4. Keep the spatula clean and sterilize it before the next treatment.

5. Do not use it around the eyes or on injuries.
6. Do not stay for too long on the same position to avoid damaging the skin. The spatula should be moving all the time.
7. Do not use the spatula if it is damaged or deformed.
8. Please treat the skin gently and use the spatula inclined at a 45-degree angle.
9. The spatula grinds a little when working. This noise is caused by the frequency of vibration.
10. Do not use this device in children, pregnant women or people with psychopathologies.
11. Do not use this device if the cable is damaged or the product has dropped into water. In this case, it should be returned to the manufacturer to be checked and repaired.
12. Do not use this device outdoors.
13. Do not use this device in damp places, such as bathrooms.
14. Do not use this device with a different cable because its parameters may not match.
15. Do not use this device with patients suffering from skin diseases or sensitive to ultrasonic stimulation.
16. Keep it turned off if not used.
17. Please contact the manufacturer if the cable is damaged to be replaced. To avoid accidents, do not attempt to repair the machine yourself.

## MODE D'EMPLOI

Veuillez lire les instructions avec attention et le conserver dans un endroit sûr pour une prochaine utilisation. Il contient de l'information importante pour utiliser l'appareil.

Vous pouvez également vous renseigner auprès d'un professionnel qui puisse vous guider et qui s'assure que vous l'utilisez correctement.

## MISE EN GARDE

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu,

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit réponds aux exigences suivantes:

- Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
- Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

## RECYCLING




Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

## BIENVENUS!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

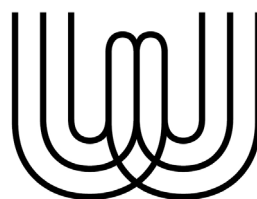

**weelko**  
the wellness  
company

## CONTENU

À l'arrivage du colis, vérifiez la présence de tous les éléments:

- Spatule à ultrason
- Câble puissance



## INFORMATION GÉNÉRALE

La Spatule Peeling portable est un instrument de beauté dessiné pour améliorer les problèmes de peau en utilisant une vibration ultrasonique avec une fréquence de 25-27 KHz qui élimine les toxines, les comédons, l'acné et les particules de peau morte.


Cet instrument est notoirement reconnu par les clients comme un outil facile à utiliser et qui améliore effectivement une grande variété de problèmes de peau. Cet appareil travaille à bas voltage ce qui permet d'une forme sûre réduire la mélanine, stériliser la peau, diminuer la taille du pore, nettoyer le pore d'une façon profonde, réduire les rides et blanchir la peau.

Il faut placer la spatule à 45 degrés afin d'accélérer le métabolisme de cellules épidermiques et améliorer la rénovation des cellules vieillissantes pendant qu'elle adoucit la kératine et rétablit l'élasticité de la peau pour la doter d'une apparence ferme, lisse et délicate.

## FONCTIONS

1. Traiter le vieillissement de la peau, éliminer la saleté et l'excès de graisse du pore.
2. Revigorer la peau et améliorer sa texture.
3. Nettoyer de manière profonde et clarifier la peau sans douleur.
4. Diluer la pigmentation. C'est idéal pour des peaux acnéiques.
5. Réduire la taille du pore.
6. Blanchir et faire briller la peau.
7. Lisser les rides. Augmenter l'élasticité de la peau.
8. Temporisateur digital pour 15 minutes de traitement. L'appareil s'arrête automatiquement quand le temps stipulé finit.
9. Instrument portable.

## DESCRIPTION PRODUIT

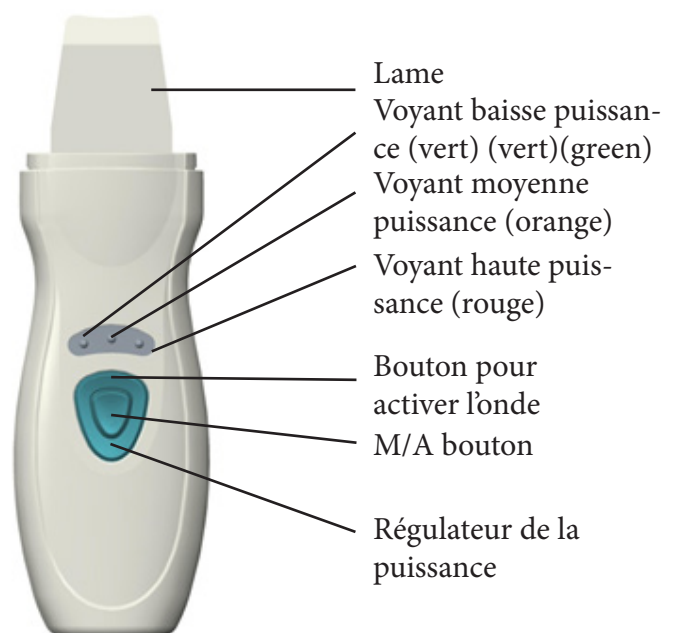



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Branchez le câble à l'alimentation et branchez l'adaptateur à la spatule.

2. Allumez l'appareil en tapant le voyant M/A. (Quand vous allumez l'appareil, vous trouverez par défaut l'onde continue et la puissance la plus basse).

3. Choisissez l'onde la plus indiquée dans chaque traitement. Il y a trois options d'onde : la pulsée, la continue et la combinée (combinaison de l'onde continue et pulsée). Si vous choisissez l'onde continue, le voyant ne changera pas. Si vous choisissez l'onde pulsée, le voyant clignotera. Si vous choisissez l'onde combinée, le voyant s'allume une seconde et clignote. L'utilisateur peut changer l'onde pour s'adapter au traitement requis. Le voyant et en conséquence la couleur change d'accord avec la puissance choisie, alors le voyant indique la puissance et l'intermittence indique l'onde qui travaille.

4. Ajuster l'intensité selon appropriée. Il y a trois niveaux de puissance à choisir: basse, moyenne et haute. La puissance établie par défaut est la basse.

5. Le temps de traitement par défaut est de 15 minutes. L'appareil bipera dès que le temps établi finisse et s'éteindra automatiquement.




1. Allumez l'appareil. Le voyant s'allumera et la spatule commencera à travailler. L'appareil est réglé par défaut sur l'onde continue et la puissance la plus basse.

2. Ajuster l'onde et la puissance d'accord avec le type de traitement. L'onde combinée est idéal pour les peaux sensibles.

3. Nettoyez la zone à traiter avec une lotion.

4. Placez la spatule sur la peau avec une inclination de 45 degrés, voyez photos ci-dessous. Déplacez la spatule en avant pour nettoyer de façon profonde la zone à traiter. Choisissez la puissance d'accord avec les caractéristiques du traitement. [Note: nettoyez la peau et la spatule avec de l'eau propre. Maintenez la peau humidifiée pendant tout le traitement.]

\*\*Utilisez la spatule selon l'illustration A, B et C.

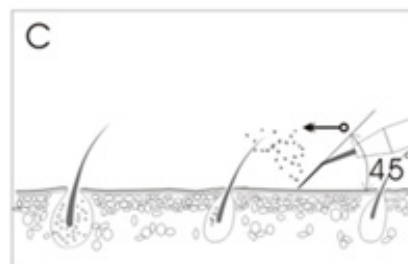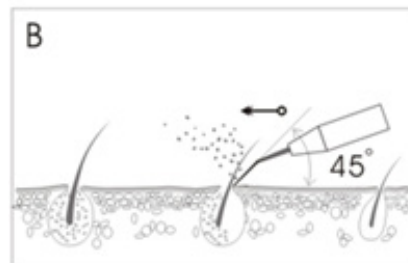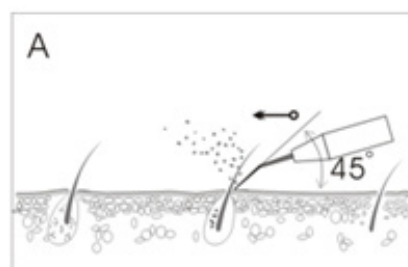

## INSTRUCTIONS

A. Éliminer l'acné sans douleur. L'acné qui se trouve aux pores est atomisé en très peu de temps par une vibration ultrasonique. L'acné s'élimine donc en nettoyant la peau.

B. Élimination des rougeurs  
Éliminer les rougeurs et les résidus de produits cosmétiques par la vibration ultrasonique avec une fréquence de 25K.

C. Nettoyage de la peau  
La lame est conçue pour nettoyer la saleté de la surface de la peau et pour en améliorer le vieillissement. Au moyen de sa vibration effective, l'effet du nettoyage est évident.

5. Nettoyez la peau avec de l'eau après le traitement.

6. Nettoyez la lame et la stérilisez avec de l'alcool.

## NOTES

1. C'est idéal pour les clients avec une peau sèche ou grasse. La peau doit se revigorer après le traitement.

2. Il faudrait appliquer de l'eau, une lotion ou un gel avant le traitement ultrasonique.

3. Si vous voulez nettoyer la peau ou traiter le vieillissement de la peau, l'onde continue est la meilleure option. L'onde pulsée est parfaite pour masser la peau et lisser les rides.

4. Gardez la spatule propre et stérilisez-la avant le prochain traitement.

5. Ne traitez pas les zones autour des yeux ou des blessures.

6. Ne travaillez pas pendant trop de temps dans la même position pour éviter de blesser la peau. Il faudrait bouger la spatule tout le temps.

7. N'utilisez pas la spatule si elle est abîmée ou déformée.

8. Faites attention à traiter la peau doucement et travaillez avec la spatule inclinée 45 degrés par rapport à la peau.

9. Quand la spatule travaille, elle grince un peu. Ce bruit est dû à la fréquence de vibration.

10. N'utilisez pas cet appareil avec les enfants, les femmes enceintes ou des personnes avec quelque psychopathologie.

11. N'utilisez pas l'appareil si le câble est abîmé ou si le produit est tombé dans l'eau. Il faudrait le retourner au fabricant pour le réparer et réviser.

12. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

13. N'utilisez pas cet article dans une ambiance humide, comme une salle de bain.

14. N'utilisez pas ce produit avec un autre câble car ses paramètres peuvent ne pas se correspondre.

15. N'utilisez pas cet appareil avec ceux qui ont une maladie de peau ou qui soient sensibles à l'stimulation ultrasonique.

16. Gardez-le éteint si vous ne l'utilisez pas.

17. Contactez le fabricant si le câble est abîmé pour le remplacer. Afin d'éviter n'importe quel accident, ne réparez rien par vous-même.

---

## BENUTZUNG DER GEBRAUCHS-ANLEITUNG

- Bitte diese Anleitung ausführlich durchlesen und für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Gerätes.

Sie können auch Ihren Fachbetrieb um Anweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig bedienen.

---

## WARNUNG

- Unter keinen Umständen die internen Komponenten des Gerätes oder Zubehöres öffnen oder prüfen. Sollte eine Prüfung notwendig sein, bitte Ihren Händler oder einen kompetenten Techniker kontaktieren.

- Verwenden Sie das Gerät niemals in einer feuchten oder schlecht belüfteten Umgebung, wie Nassräume, Badezimmer usw., um Schäden an den elektrischen Komponenten des Gerätes zu vermeiden.
- Das Gerät niemals draußen verwenden. Witterungseinflüsse können zu Schäden führen.

- Wenn das Netzkabel zerstört wurde, bitten kontaktieren Sie einen Fachmann, um es zu warten und auszutauschen, um mögliche Gefahren zu vermeiden oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

---

## EC-KONFORMITÄTSERKÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

- Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
- Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

DE

---

## RECYCLING




Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

---

## WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können auch einen Fachmann um Rat fragen, um sicher zu sein, dass Sie das Gerät richtig verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung wegen Fehlbedienung.

Die Firma behält sich das Recht vor, die Details des Gerätes ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sollten in dieser Bedienungsanleitung Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail, damit wir diese korrigieren können.

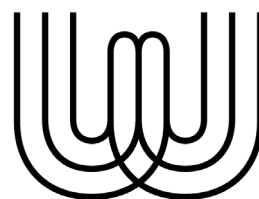

**weelko**  
the wellness  
company



## INHALT DER VERPACKUNG

Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen Sie bitte folgendes:

- Tragbarer Spatel
- Power cord



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der tragbare Peeling-Spatel ist ein Schönheitswerkzeug designt zur Verbesserung von Hautproblemen. Es werden Ultraschallvibrationen mit einer Frequenz von 25 bis 27 kHz verwendet, die Giftstoffe, Mitesser, Akne und abgestorbene Hautpartikel entfernen.

Dieser Spatel wird von Kunden allgemein als einfach zu bedienen und zur wirksamen Verbesserung einer Vielzahl von Hautproblemen anerkannt. Dieses Gerät arbeitet mit niedriger Spannung, was ermöglicht, die Melanin zu reduzieren, die Haut zu sterilisieren, die Porengröße zu verkleinern, die Poren tief zu reinigen, Falten zu reduzieren und die Haut aufzuhellen.

Stellen Sie den Spatel auf 45 Grad, um den Stoffwechsel der Epidermiszellen zu beschleunigen und die Erneuerung alternder Zellen zu fördern. Gleichzeitig wird das Keratin erweicht und die Elastizität der Haut wiederhergestellt, um ihr ein festes, glattes und zartes Aussehen zu verleihen.

## FUNKTION

1. Behandlung von Hautalterung, Entfernung von Schmutz und überschüssiges Fett aus der Pore.
2. Die Haut kräftigen und die Textur verbessern.
3. Schmerzfremie Tiefenreinigung und Aufhellung der Haut.
4. Die Pigmentierung verdünnen. Es ist ideal für Haut mit Akne.
5. Die Porengröße reduzieren.
6. Die Haut aufhellen und strahlen lassen.
7. Falten glätten. Die Hautelastizität erhöhen.
8. Digitaler Timer für 15 Minuten Behandlung. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die festgelegte Zeit abgelaufen ist.
9. Tragbarer Spatel.

## Beschreibung des Produktes





## ANLEITUNG

1. Schließen Sie das Kabel an die Stromversorgung an und schließen Sie den Adapter an den Spatel an.

2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf das Ein- / Ausschalttaste drücken. (Wenn Sie das Gerät einschalten, finden Sie standardmäßig die Kontinuierliche und die niedrigste Leistung).

3. Wählen Sie die für jede Behandlung geeignetste Welle. Es gibt drei Welloptionen: pulsierte, kontinuierliche und kombinierte (Kombination aus kontinuierlicher und pulsierter Welle). Wenn Sie die Kontinuierliche wählen, ändert sich Lichtanzeige nicht. Wenn Sie die Pulsierte Welle wählen, blinkt die Anzeige. Wenn Sie die kombinierte Welle wählen, leuchtet die Anzeige eine Sekunde lang auf und blinkt. Der Benutzer kann die Welle entsprechend der gewünschten Behandlung ändern. Die Lichtanzeige und folglich die Farbe ändern sich entsprechend der gewählten Leistung. Das Licht zeigt die Leistung an und das blinkende Licht zeigt die Arbeitswelle an.

4. Passen Sie die Intensität entsprechend an. Es gibt drei Leistungsstufen zur Auswahl: niedrig, mittel und hoch. Die standardmäßig eingestellte Leistung ist niedrig.

5. Die Standardbehandlungszeit beträgt 15 Minuten. Das Gerät piept, sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, und schaltet sich automatisch aus.




1. Schalten Sie das Gerät ein. Das Licht geht an und der Spatel fängt an zu arbeiten. Das Gerät ist standardmäßig auf kontinuierliche Welle und niedrigste Leistung eingestellt.

2. Wählen Sie die gewünschte Leistung und Welle je nach Behandlung. Die kombinierte Welle ist ideal für empfindliche Haut.

3. Reinigen Sie mit Lotion die zu behandelnde Hautzone.

4. Stellen Sie der Spatel mit einem ungefähren 45° Grad Winkel, wie auf der Abbildung unten gezeigt. Bewegen Sie den Spatel nach vorne, um eine tiefe Reinigung durchzuführen. Stellen Sie die passende Leistung je nach Behandlung. (Hinweis: Die Haut muss gut befeuchtet während der ganzen Behandlung sein).

\*\*Verwenden Sie den Spatel wie auf der Abbildung A, B und C gezeigt.

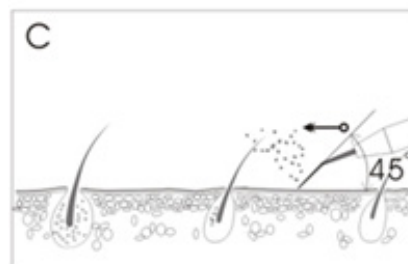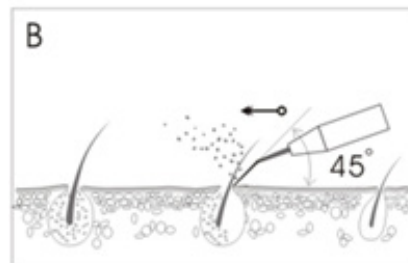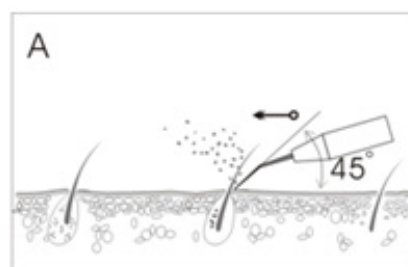

## INSTRUCTIONS

A. Beseitigen Sie Akne ohne Schmerzen. Die in den Poren angesammelte Akne wird in sehr kurzer Zeit durch Ultraschallvibration zerstäubt. Akne wird daher durch Reinigung der Haut beseitigt.

B. Beseitigung von Rötungen  
Beseitigen Sie Rötungen und kosmetische Produktrückstände durch Ultraschallvibrationen mit einer Frequenz von 25K.

C. Hautreinigung  
Der Spatel wurde entwickelt, um den Schmutz von der Hautoberfläche zu reinigen und die Hautalterung zu verbessern. Durch seine effektive Vibration ist die Wirkung der Reinigung offensichtlich.

5. Reinigen Sie die Haut nach der Behandlung mit Wasser.

6. Reinigen Sie den Spatel und sterilisieren Sie ihn mit Alkohol

## ANMERKUNGEN

1. Es ist ideal für Kunden mit trockener oder fettiger Haut. Die Haut sollte nach der Behandlung lebendiger werden.

2. Vor der Ultraschallbehandlung sollten Wasser, Lotion oder Gel aufgetragen werden.

3. Wenn Sie die Haut reinigen oder alternde Haut behandeln möchten, ist die kontinuierliche Welle die beste Option. Die pulsierte Welle ist perfekt zum Massieren der Haut und zum Glätten von Falten.

4. Halten Sie den Spatel sauber und sterilisieren Sie ihn vor der nächsten Behandlung.

5. Behandeln Sie nicht damit die Augenbereiche oder Wunden.

6. Arbeiten Sie nicht zu lange in derselben Position, um Hautverletzungen zu vermeiden. Sie sollten den Spatel ständig bewegen.

7. Verwenden Sie den Spatel nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.

8. Behandeln Sie die Haut vorsichtig und arbeiten Sie mit dem Spatel um 45 Grad zur Haut geneigt.

9. Wenn der Spatel funktioniert, quietscht er ein wenig. Dieses Geräusch ist auf die Vibrationsfrequenz zurückzuführen.

10. Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Kindern, schwangeren Frauen oder Personen mit Psychopathologie.

11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist oder wenn das Produkt ins Wasser gefallen ist. Es sollte zur Reparatur und Prüfung an den Hersteller zurückgesandt werden.

12. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

13. Verwenden Sie diesen Artikel nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. in einem Badezimmer.

14. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit anderen Kabeln, da die Parameter möglicherweise nicht übereinstimmen.

15. Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Personen, die an einer Hautkrankheit leiden oder empfindlich auf Ultraschallsimulation reagieren.

16. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, wenn Sie es nicht verwenden.

17. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Kabel beschädigt ist, um es zu ersetzen. Reparieren Sie nichts selbst, um Unfälle zu vermeiden.

## UTILIZZO DI QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

È molto importante leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro. Contiene importanti informazioni su come utilizzare l'apparecchiatura.

È possibile consultare un professionista

## AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, come stanze umide, bagni, ecc. onde evitare eventuali danni alle componenti elettriche.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al proprio distributore onde evitare qualsiasi rischio.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

- Le misure della Direttiva sulla "bassa tensione": 2014/35/EU
- Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2014/30/EU

## RICICLAGGIO




Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

## BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.

L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti ad un utilizzo non corretto del prodotto.

L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo

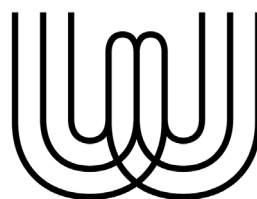

**weelko**  
the wellness  
company

## CONTENUTO

Una volta ricevuto il pacchetto verificare la presenza dei seguenti elementi:

- Spatola esfoliante
- Cavo di alimentazione



## INFORMAZIONI GENERALI

La Spatola Esfoliante Portatile è uno strumento di bellezza progettato per migliorare i problemi della pelle. Attraverso una vibrazione ultrasonica con una frequenza di 25-27 KHz rimuove tossine, punti neri, acne e particelle di pelle morta.

È un dispositivo molto apprezzato dai clienti perché è facile da usare e perché migliora efficacemente un'ampia varietà di problemi della pelle. Questo dispositivo funziona a bassa tensione, il che permette di ridurre la melanina, sterilizzare la pelle, ridurre le dimensioni dei pori, pulire i pori in profondità, ridurre le rughe e sbiancare la pelle.

Posizionare la spatola a 45 gradi, in modo da accelerare il metabolismo delle cellule epidermiche e migliorare il rinnovamento delle cellule invecchiate, oltre ad ammorbidire la cheratina e ripristinare l'elasticità della pelle per conferirle un aspetto sodo, levigato e delicato.

## FUNZIONI

1. Trattare l'invecchiamento della pelle, rimuovere lo sporco e l'olio in eccesso dai pori.
2. Rivitalizzare la pelle e migliorare la sua consistenza.
3. Detergere in profondità e schiarire la pelle in modo indolore.
4. Diluire la pigmentazione. È ideale per la pelle con acne.
5. Ridurre la dimensione dei pori.
6. Sbiancare e illuminare la pelle.
7. Appianare le rughe. Aumentare l'elasticità della pelle.
8. Dispone di un timer digitale per 15 minuti di trattamento. Il dispositivo si ferma automaticamente allo scadere del tempo selezionato.
9. È un dispositivo portatile.

## DESCRIZIONE PRODOTTO







1. Collegare il cavo e connettere l'adattatore alla spatola.
2. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione / spegnimento (l'onda continua e l'intensità minima sono impostate come impostazione predefinita).
3. Selezionare il tipo di onda più adatto per ogni trattamento. Esistono tre tipi di onda: pulsata, continua e combinata (combinazione di onda continua e onda pulsata). Quando si lavora in onda continua, il LED rimarrà acceso. Quando si lavora in onda pulsata, il LED lampeggerà in modo intermittente. Quando si lavora in onda combinata, il LED si alternerà in modo permanente con un lampeggio intermittente.


È possibile modificare il tipo di onda a seconda di ciascun trattamento. Il LED e il suo colore cambiano a seconda dell'intensità selezionata, quindi il LED indica l'intensità e il lampeggio indica il tipo di onda utilizzata

4. Regolare il livello di intensità in base alle necessità. Sono disponibili tre livelli di intensità: basso, medio e forte. L'impostazione predefinita è: Bassa intensità.
5. La spatola ha un tempo di lavoro programmato di 15 minuti. Trascorso questo tempo emetterà un ronzio e si spegnerà automaticamente.

## ISTRUZIONI D'USO

1. Accendi la spatola. Il LED si accenderà e la spatola inizierà a funzionare. Il dispositivo è configurato di default con l'onda continua e l'intensità più bassa.
2. Regolare il tipo di onda e l'intensità in base al tipo di trattamento. L'onda combinata è ideale per la pelle sensibile.
3. Pulire l'area da trattare con una lozione.
4. Posizionare la spatola sulla pelle con un'inclinazione di 45 gradi, come mostrato nelle immagini seguenti. Spostare la spatola in avanti in profondità per pulire l'area da trattare. Seleziona l'intensità in base alle caratteristiche del trattamento. (Nota: pulire sia la pelle che la spatola con acqua pulita. Mantenere umida la pelle del paziente durante tutto il trattamento.)

\*\*Utilizzare la spatola come mostrato nelle immagini A, B e C

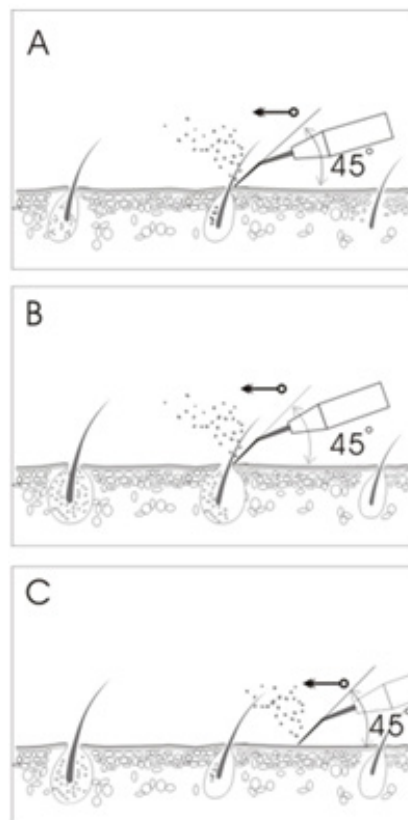



## INSTRUCTIONS

- A. Elimina l'acne senza dolore. Una vibrazione ultrasonica atomizza l'acne presente nei pori in pochissimo tempo. Pertanto, l'acne viene eliminata attraverso la pulizia della pelle.
- B. Elimina il rossore. La vibrazione ultrasonica, con una potenza di 25K, elimina arrossamenti e residui di prodotti cosmetici.
- C. Detergere la pelle. La spatola pulisce lo sporco dalla superficie della pelle e migliora l'invecchiamento della pelle stessa. Attraverso la vibrazione, l'effetto pulente è chiaramente visibile.
5. Pulire la pelle con acqua dopo il trattamento.
6. Pulire la spatola e sterilizzarla con alcool.

## ANMERKUNGEN

1. È ideale per i pazienti con pelle secca o grassa. La pelle è rinvigorita dopo il trattamento.
2. Applicare acqua, una lozione o un gel prima del trattamento ad ultrasuoni.
3. Per pulire la pelle o trattare l'invecchiamento della pelle, l'onda continua è la scelta migliore. L'onda pulsata è perfetta per massaggiare la pelle e levigare le rughe.
4. Conservare la spatola pulita e sterilizzarla prima del successivo utilizzo.
5. Non utilizzare la spatola intorno agli occhi o sulle ferite.

6. Non lavorare sulla stessa area per troppo tempo per evitare di danneggiare la pelle. La spatola deve muoversi costantemente.
7. Non utilizzare la spatola se è danneggiata o deformata.
8. Trattare delicatamente la pelle e lavorare con la spatola inclinata di 45 gradi rispetto alla pelle.
9. Quando la spatola è in funzione, scricchiola leggermente. Questo scricchiolio è dovuto alla frequenza delle vibrazioni.
10. Non utilizzare questo dispositivo su bambini, donne con gravidanza o persone con psicopatia.
11. Non utilizzare il dispositivo se il cavo è rotto o il prodotto si è bagnato. In questo caso, dovrà essere restituito al produttore per la riparazione e l'ispezione.
12. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
13. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi, come i bagni.
14. Non utilizzare il dispositivo con altri cavi, i parametri potrebbero non essere compatibili.
15. Non utilizzare il dispositivo su pazienti con malattie della pelle o sensibili alla stimolazione ultrasonica.
16. Tenere il dispositivo spento se non si intende utilizzarlo.
17. Se il cavo è danneggiato, contattare il rivenditore per sostituirlo. Per evitare incidenti, non provare a ripararlo da solo.