



ES Manual de instrucciones
EN Instruction manual
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale d'istruzioni

WKE004

FINEX

BAÑO DE PARAFINA
LUXURY PARAFFIN BATH
CHAUFFE-PARAFFINE DE LUXE
LUXUS PARAFFINBAD
SCALDAPARAFFINA



USO DEL MANUAL

Es muy importante que lea detenidamente este manual y lo guarde en lugar seguro para futura utilización. Contiene información importante sobre cómo utilizar el aparato.

Puede consultar a un profesional para que lo guíe y asegurarse de que está utilizando el aparato correctamente.

ADVERTENCIAS

- Bajo ningún concepto intente abrir o inspeccionar los componentes internos del aparato. Si una inspección fuese necesaria, contacte con su distribuidor o con un técnico autorizado.
- Nunca utilice el aparato en lugares con altos niveles de humedad o con escasa ventilación para evitar daños a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el aparato en el exterior: la exposición a elementos externos podría dañarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite un cable nuevo a un técnico o profesional y sustitúyalo para evitar riesgos. Contacte con el distribuidor en caso necesario.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:

- Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.



La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.



CONTENIDO

A la llegada del paquete, asegúrese que el contenido esté presente:

-Aparato baño de parafina

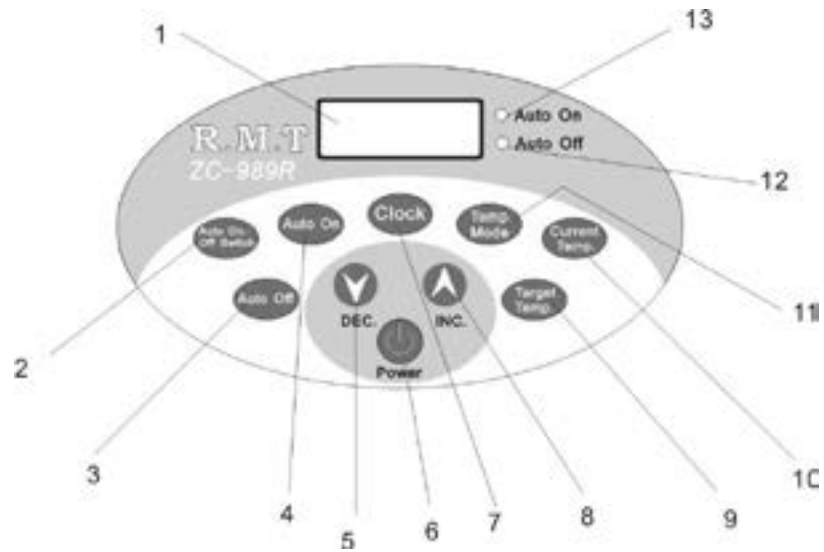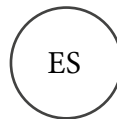

INFORMACIÓN GENERAL

El baño de parafina para tratamientos de belleza y de uso doméstico es muy popular gracias a su efecto notable en pieles secas y con signos de envejecimiento, pero también para tratamientos antiarrugas.

Este equipamiento de fácil uso es muy utilizado en los centros de belleza por sus destacadas características: un regulador de la temperatura y del tiempo, una rápida fusión, dos unidades de temperatura (Celsius y Fahrenheit) y su tanque de gran capacidad.

PANEL DIGITAL

1. Display
2. Auto on/off switch : botón modo automático
3. Auto off: ajuste de la hora para desactivar el modo automático
4. Auto on: ajuste de la hora para activar el modo automático.
5. DEC.: menos temperatura/tiempo
6. Botón Power
7. Clock: reloj
8. INC.: más temperatura/tiempo
9. Target temperature: temperatura deseada
10. Current temperature : temperatura actual
11. Temperature unit setting : ajuste de la unidad de temperatura
12. Automatic mode off indicator : luz modo automático off
13. Automatic mode on indicator : luz

INSTRUCCIONES DE USO

1. Pulse el botón "Power" para encender el aparato.
2. La primera vez que utilice el aparato, debe ajustar el reloj a la hora actual. Si pulsa el botón "7", los dos primeros números se encenderán y entonces podrá regular la hora con los botones "5" y "8". Si pulsa el botón "7" de nuevo, se encenderán los dos últimos números y podrá ajustar los minutos. Para finalizar el ajuste del reloj, pulse "7" de nuevo.
3. Para ajustar el modo de trabajo, pulse el botón "2". Entonces, se encenderán las luces de "Auto on" y "Auto off". Después, cabe pulsar el botón "4" para ajustar la hora en qué el modo automático se debe activar con los botones "5" y "8". Con el botón "3", podrá regular la hora en qué el modo automático se desactivará. Si las luces ("12" y "13") no se encienden significa que el aparato está trabajando en modo manual.
4. Ajuste de la unidad de temperatura. Pulse el botón "11" para seleccionar la unidad de temperatura. Con los botones "5" y "8" podrá escoger si quiere la unidad Fahrenheit (F) o la unidad Celsius (C).
5. Ajuste de la temperatura deseada. Si pulsa el botón "9" establecerá la temperatura necesaria. Los botones "5" y "8" le permitirán escoger la temperatura deseada.
6. Display de la temperatura actual. Pulse el botón "10" para ver la temperatura de trabajo actual.

OBSERVACIONES

- Una vez activado el modo automático, no desconecte el aparato. Asegúrese de que el reloj está ajustado a la hora actual.
- Si no utiliza el modo automático, asegúrese de que apaga el aparato después de usarlo.
- El aparato puede guardar la temperatura utilizada la última vez.
- Antes de iniciar el tratamiento, verifique la temperatura con su mano para evitar que sea incómoda para el paciente.
- Si la piel se encuentra dañada, no aplique este tratamiento.
- Una vez finalizado el tratamiento, no derrame la parafina que queda si todavía está líquida. Apague el aparato y espere que la parafina se enfríe y se solidifique. Después encienda el aparato de nuevo y espere que la parafina del fondo se derrieta un poco. De ese modo, podrá sacar la parafina en bloque más fácilmente.
- Para acortar el tiempo de fusión, escoja la temperatura máxima. Una vez la parafina sea completamente líquida, ajuste la temperatura debidamente.
- Si el cable se encuentra deteriorado o dañado, acuda al fabricante o al servicio técnico autorizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE FUSIÓN	30 minutos
TEMPERATURA DE TRABAJO	de 46 a 60°
CAPACIDAD	5000 ml
POTENCIAL NOMINAL	200W
VOLTAJE NOMINAL	AC 220V ~ 240V

USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WELKOME!

Thank you very much for your purchase. Please read carefully the instructions before using the device. We accept no responsibility for damages caused by misuse.

The company reserves the right to amend the details of the devices with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.




CONTENT

On arrival of the package, check the presence of the following items:

- Luxury paraffin bath



EN

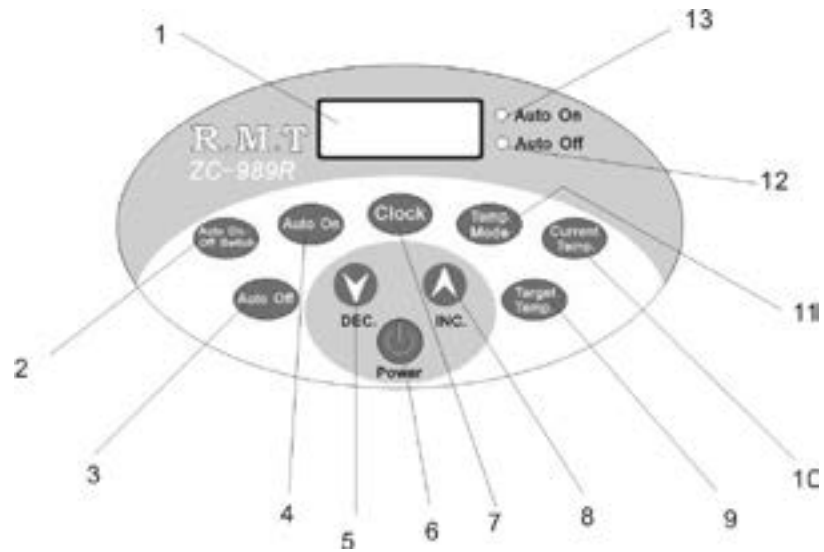

GENERAL INFORMATION

The paraffin bath is popular for beauty and home treatments because of its outstanding effect on dry and aged skins, but also on anti-wrinkle treatments.

This easy-to-use equipment is popular among the beauty centres all over the world for the following features: a temperature controller and display, a quick melting, a timing controller and display, a temperature switch in Fahrenheit and Celsius degrees and a large capacity.

GENERAL DISPLAY

1. Display
2. Auto on/off switch : Automatic mode switch
3. Auto off: Time setting to end the automatic mode
4. Auto on: Time setting to start the automatic mode
5. DEC.: Temperature/time down
6. Power button
7. Clock
8. INC.: Temperature/time up
9. Target temperature
10. Current temperature
11. Temperature unit setting
12. Automatic mode off indicator
13. Automatic mode on indicator

OPERATION

1. To switch the equipment on, press the button "Power".
2. The first time you use the equipment, the clock needs to be adjusted on time. To do so, press the button "7" and the first two numbers of the clock will shine. Then, by pressing the buttons "5" and "8", you will be able to adjust the hour. If you press the button "7" again, the last two numbers of the clock will shine. Then, press the buttons "5" and "8" to adjust the minutes. To complete the clock setting, press the button "7" again.
3. To adjust the working mode, press the "2" button. Then, the "Auto on" and "Auto off" indicator will shine. If you press the "4" button, the numbers of the display will shine and you will be able to adjust the time at which the automatic mode has to be switched on by pressing the "5" and "8" buttons. If you press the "3" button, you will be able to set the time at which the automatic mode has to be switched off. If the indicators ("12" and "13") do not shine, it means that the machine is working in the manual mode.
4. Temperature unit setting. Press the "11" button to select the temperature unit. Then, the "5" and "8" will allow you to choose either the Fahrenheit (F) or the Celsius (C) scale.
5. Target temperature setting. Press the "9" button to set the target temperature. The "5" and "8" buttons will allow you to reach the temperature needed.
6. Current temperature display. Press the "10" button to see the current temperature.

REMARKS

- After turning on the automatic mode, do not unplug the equipment. Make sure that the clock is on time.
- If the automatic mode is not used, make sure that you switch the equipment off after use.
- The machine can save the temperature that was set last time.
- Before starting the treatment, check the temperature on your hand to see if it is the proper one and make sure it will not be uncomfortable for the customer.
- If the skin is damaged, do not apply this treatment.
- After finishing the treatment, do not pour the remaining paraffin when it is still liquid. Turn off the unit and wait for the paraffin to get colder and become completely solid. Then, turn the equipment on again and wait for the paraffin at the bottom to be melted and you will be able to remove the paraffin block easily.
- In order to shorten the melting time, choose the maximum temperature. Once the paraffin is completely melted, then adjust the temperature at the proper one.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by one provided by the manufacturer or the authorised technical service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MELTING TIME	30 minutes
TEMPERATURE RANGE	46 - 60°
CAPACITY	5000 ml
RATED POWER	200W
RATED VOLTAGE	AC 220V ~ 240V

UTILISATION DU MODE D'EMPLOI

Veillez lire les instructions avec attention et le conserver dans un endroit sûr pour une prochaine utilisation. Il contient de l'information importante pour utiliser l'appareil.

Vous pouvez également vous renseigner auprès d'un professionnel qui puisse vous guider et qui s'assure que vous l'utilisez correctement.

MISE EN GARDE

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit réponds aux exigences suivantes:

- Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
- Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE



Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUS!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.



L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

À l'arrivage du colis, vérifiez la présence de tous les composants:

- Chauffe-paraffine de luxe

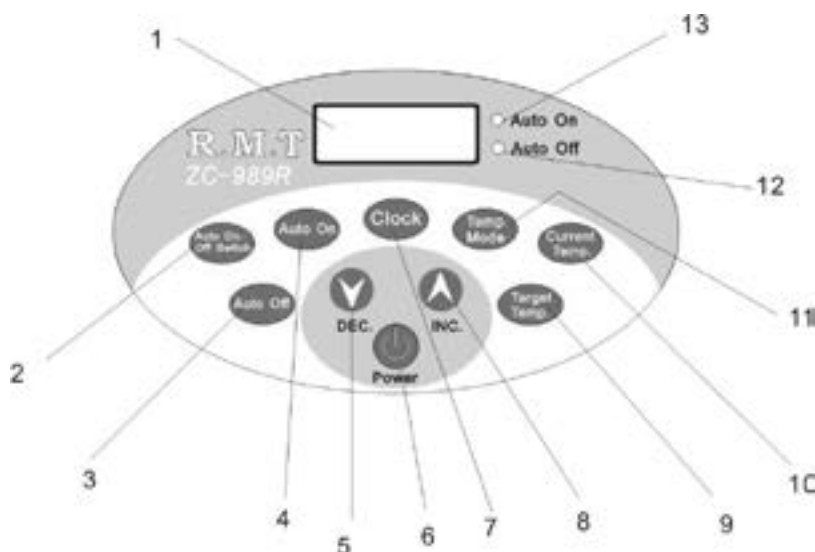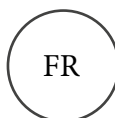

INFORMATION GÉNÉRALE

Le bain de paraffine pour des traitements de beauté est très populaire grâce à son effet remarquable pour des peaux âgées et sèches, mais aussi pour des traitements antirides.

Cet équipement maniable est très utilisé parmi les centres de beauté grâce aux caractéristiques suivantes : un régulateur de la température et du temps, une rapide fusion, deux unités de température (degrés Celsius et Fahrenheit) et une grande capacité.

DISPLAY GÉNÉRAL

1. Display
2. Auto on/off switch : bouton mode automatique
3. Auto off: réglage du temps où finir le mode automatique
4. Auto on: réglage du temps où commencer le mode automatique
5. DEC.: température/temps en bas
6. Bouton Power
7. Clock: montre
8. INC.: température/temps en haut
9. Target temperature: température souhaitée
10. Current temperature : température actuelle
11. Temperature unit setting : réglage de l'unité de température
12. Automatic mode off indicator : indicateur mode automatique off
13. Automatic mode on indicator : indicateur mode automatique on

MODE D'EMPLOI

1. Tapez le bouton "Power" pour allumer l'appareil.

2. La première fois que vous utilisez l'appareil, la montre doit se régler à l'heure. Tapez le bouton "7" et les deux premiers numéros s'allumeront, alors les boutons "5" et "8" vous permettront régler l'heure. Si vous tapez le bouton "7" à nouveau, les deux derniers numéros s'allumeront et avec les boutons "5" et "8" vous pourrez régler les minutes. Afin de terminer le réglage de la montre, tapez le bouton "7" à nouveau.

3. Afin de régler le mode de travail, tapez le bouton "2". Après, les voyants "Auto on" et "Auto off" s'allumeront. Si vous tapez le bouton "4", les numéros du display s'allumeront et vous pourrez régler l'heure où le mode automatique s'activera, par les boutons "5" et "8". En tapant le bouton "3", vous réglerez l'heure où le mode automatique s'éteindra. Si les voyants ("12" et "13") ne s'allument pas, ça signifie que l'appareil travaille sur le mode manuel.

4. Réglage de l'unité de température. Tapez le bouton "11" pour sélectionner l'unité de température. Après, si vous tapez les boutons "5" et "8", vous pourrez choisir l'unité de température, soit l'échelle Fahrenheit (F) soit l'échelle Celsius (C).

5. Réglage de la température souhaitée. Tapez le bouton "9" pour régler la température où vous souhaitez arriver. Les boutons "5" et "8" vous permettront choisir la température souhaitée.

6. Display de la température de travail actuelle. Tapez le bouton "10" afin de voir la température de travail actuelle.

REMARQUES

- Après avoir allumé le mode automatique, ne débranchez pas l'appareil. Assurez-vous que la montre est à l'heure.
- Si vous n'utilisez pas le mode automatique, assurez-vous que vous éteignez l'appareil après l'utilisation.
- L'appareil peut sauvegarder la température utilisée la dernière fois.
- Avant d'initier le traitement, vérifiez la température avec votre main pour éviter que soit inconfortable pour le patient.
- Après avoir fini le traitement, ne versez pas la paraffine qui reste si elle est encore liquide. Éteignez l'appareil et attendez que la paraffine refroidisse et devienne complètement solide. Après, allumez l'appareil à nouveau et attendez que la paraffine au fond se fonde. De cette façon, vous pourrez enlever le bloque de paraffine facilement.
- Afin d'écourter le temps de fusion, choisissez la température maximale. Une fois la paraffine soit complètement fondue, réglez la température, comme il faut.
- Si le câble est abîmé, faites appel au fabricant ou au service technique autorisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPS DE FUSION	30 minutes
TRANCHE DE TEMPERATURE	46 - 60°
CAPACITÉ	5000 ml
PUISSANCE NOMINALE	200W
VOLTAGE NOMINAL	AC 220V ~ 240V

BENUTZUNG DER GEBRAUCHS- ANLEITUNG

• Bitte diese Anleitung ausführlich durchlesen und für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Gerätes.

Sie können auch Ihren Fachbetrieb um Anweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig bedienen.

WARNUNG

• Unter keinen Umständen die internen Komponenten des Gerätes oder Zubehöres öffnen oder prüfen. Sollte eine Prüfung notwendig sein, bitte Ihren Händler oder einen kompetenten Techniker kontaktieren.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in einer feuchten oder schlecht belüfteten Umgebung, wie Nassräume, Badezimmer usw., um Schäden an den elektrischen Komponenten des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät niemals draußen verwenden. Witterungseinflüsse können zu Schäden führen.

• Wenn das Netzkabel zerstört wurde, bitten Sie einen Fachmann, um es zu warten und auszutauschen, um mögliche Gefahren zu vermeiden oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

• Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

• Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RECYCLING



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können auch einen Fachmann um Rat fragen, um sicher zu sein, dass Sie das Gerät richtig verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung wegen Fehlbedienung.

Die Firma behält sich das Recht vor, die Details des Gerätes ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sollten in dieser Bedienungsanleitung Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail, damit wir diese korrigieren können.




INHALT DER VERPACKUNG

Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen Sie bitte folgendes:

- Luxus Paraffinbad



DE

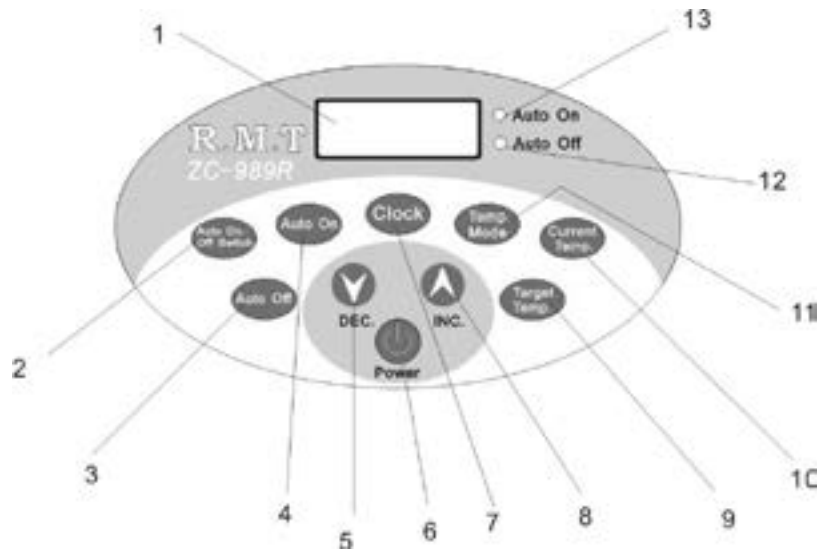

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Paraffin-Bad ist beliebt bei Kosmetikbehandlungen und Behandlungen zu Hause wegen seiner hervorragenden Wirkung sowohl auf trockenen und alternden Häute, als auch auf Anti-Falten-Behandlungen.

Dieses Gerät ist leicht zu bedienen und sehr beliebt bei Kosmetikstudios auf der ganzen Welt dank folgende Eigenschaften: ein Temperaturregler und Display, das schnelle Schmelzen, eine Zeituhr, ein Temperaturschalter in Fahrenheit und Celsius Grad und ein großes Fassungsvermögen.

DISPLAY

1. Display
2. Auto Ein/Aus Knopf : Automatische Modus Schalter
3. Auto Aus: Zeiteinstellung, um den automatischen Modus zu beenden
4. Auto Ein: Zeiteinstellung, um den automatischen Modus anzufangen
5. DEC.: Temperatur/Zeit abwärts
6. Einschaltknopf
7. Zeituhr
8. INC.: Temperatur/Zeit aufwärts
9. Gewünschte Temperatur
10. Aktuelle Temperatur
11. Einstellen der Temperatureinheit
12. Automatische Aus-Modus Anzeige
13. Automatische Ein-Modus Anzeige

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste "Power".
- Das erste Mal, wenn Sie das Gerät verwenden, muss die Zeituhr eingestellt werden. Um dies zu tun, drücken Sie die Taste "7" und die ersten beiden Ziffern der Uhr leuchten. Dann durch Drücken der Tasten "5" und "8", werden Sie in der Lage sein, die „Stunden“ einzustellen. Wenn Sie wieder die Taste "7" drücken, die letzten beiden Zahlen der Uhr leuchten. Dann drücken Sie die Tasten "5" und "8", um die „Minuten“ einzustellen. Um die Uhr Einstellung zu beenden, drücken Sie die Taste "7" wieder.
- Zur Einstellung des Arbeitsmodus, drücken Sie die Taste "2". Dann wird die "Auto-on" und "Auto off"-Anzeige leuchten. Wenn Sie die Taste "4" drücken, werden die Zahlen der Anzeige leuchten, und Sie werden in der Lage sein, die Zeit einzustellen, zu der der automatische Modus eingeschaltet werden soll durch Drücken der "5" und "8"-Tasten. Wenn Sie die "3"-Taste drücken, werden Sie in der Lage, die Zeit zu setzen, zu der der automatische Modus ausgeschaltet werden soll. Wenn die Anzeigen ("12" und "13") nicht leuchten, bedeutet dies, dass die Maschine im manuellen Modus arbeitet.
- Einstellen der Temperatur des Gerätes. Drücken Sie die "11", um die gewünschte Temperatur einzustellen. Dann mit der "5" und "8" Tasten können Sie entweder die Fahrenheit (F) oder das Celsius (C)-Skala wählen.
- Gewünschte Temperatur-Einstellung. Drücken Sie die Taste "9", um die Zieltemperatur einzustellen. Drücken Sie die "5" und "8"-Tasten um die benötigte Temperatur zu erreichen.
- Aktuelle Temperaturanzeige. Drücken Sie die Taste "10", um die aktuelle Temperatur zu sehen.

BEMERKUNGEN

- Nach dem Einschalten des Automatikmodus dürfen Sie das Gerät nicht ausschalten. Stellen Sie sicher, dass die Uhr auf der aktuelle Uhrzeit gestellt ist.
- Wenn der automatische Modus nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nach Gebrauch ausschalten.
- Das Gerät kann die Temperatureinstellung speichern, die zuletzt eingestellt wurde.
- Vor Beginn der Behandlung, überprüfen Sie die Temperatur auf der Hand, um zu sehen, ob sie das richtige ist und um sicherzustellen, dass es nicht unangenehm für den Kunden ist.
- Wenn die Haut beschädigt ist, verwenden Sie nicht diese Behandlung.
- Nach Beendigung der Behandlung gießen Sie die Restparaffin nicht, wenn es noch flüssig ist. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie bis das Paraffin kälter wird und vollständig fest ist. Schalten Sie dann das Gerät wieder ein und warten Sie bis das Paraffin an der Unterseite geschmolzen ist damit der Paraffinblock leichter zu entfernen ist.
- Um die Schmelzzeit zu verkürzen, wählen Sie die maximale Temperatur. Wenn das Wachs vollständig geschmolzen ist, dann stellen Sie die richtige Temperatur ein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kaufen Sie die Komponente beim Hersteller oder bei einem autorisierten technischen Service.

TECHNISCHE DATEN

SCHMELZZEIT	30Minuten
EINSTELLBARE TEMPERATURE	46 - 60°
FASSUNGSVERMOGEN	5000 ml
NENNLEISTUNG	200W
NENNSPANNUNG	AC 220V ~ 240V

UTILIZZO DI QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

È molto importante leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro. Contiene importanti informazioni su come utilizzare l'apparecchiatura.

È possibile consultare un professionista per assistenza e per assicurarsi di utiliz-

AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, come stanze umide, bagni, ecc. onde evitare eventuali danni alle componenti elettriche.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al proprio distributore onde evitare qualsiasi rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

- Le misure della Direttiva sulla "bassa tensione": 2014/35/EU
- Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2014/30/EU

RICICLAGGIO



Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.

L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti ad un utilizzo non corretto del prodotto.



L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.



CONTENUTO

Una volta ricevuto il pacchetto verificare la presenza dei seguenti elementi:

- Scaldaparaffina

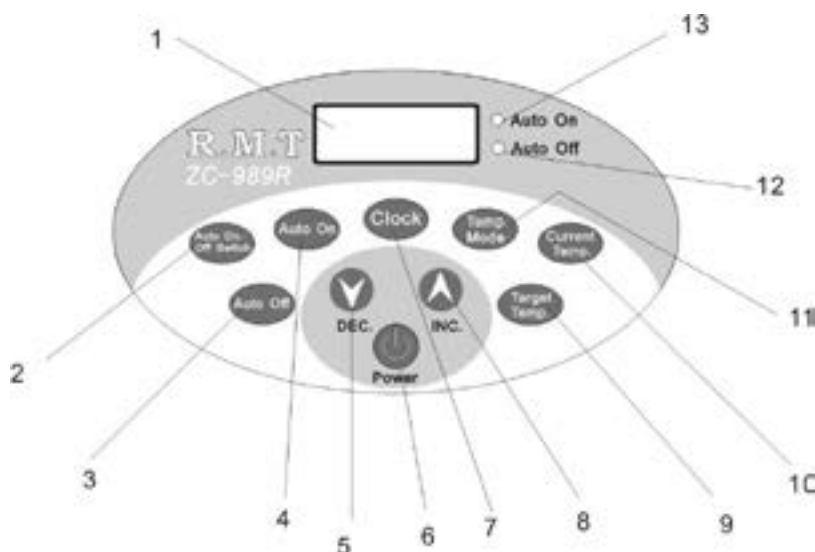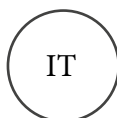

INFORMAZIONE GENERALE

Lo scaldaparaffina per trattamenti estetici e uso domestico è molto popolare grazie al notevole effetto benefico su pelli secche e con segni dell'invecchiamento, ed anche come trattamento antirughe.

Questa apparecchiatura facile da usare è molto usata nei centri estetici per le seguenti caratteristiche: il regolatore di temperatura e tempo, il veloce scioglimento della paraffina, due unità di misura della temperatura (Celsius e Fahrenheit) e la elevata capacità.

DISPLAY

1. Display
2. Auto on/off switch : pulsante modalità automatica
3. Auto off: impostazione dell'ora per disabilitare la modalità automatica
4. Auto on: impostazione dell'ora per attivare la modalità automatica
5. DEC.: ridurre la temperatura/tempo
6. Tasto Power
7. Clock: orologio
8. INC.: aumenta la temperatura/tempo
9. Target temperature: temperatura desiderata
10. Current temperature: temperatura corrente
11. Temperature unit setting: impostazione dell'unità di misura della temperatura
12. Automatic mode off indicator: spia luminosa per quando la modalità automatica è disabilitata.
13. Automatic mode on indicator: spia luminosa per quando la modalità automatica è attivata.

ISTRUZIONI D'USO

1. Premere il tasto "Power" per accendere l'apparecchiatura.
2. La prima volta che si utilizza il dispositivo, è necessario impostare l'orologio all'ora corrente. Premendo il tasto "7", i primi due numeri si accendono, ed è quindi possibile impostare l'ora attraverso i tasti "5" e "8". Premendo nuovamente il tasto "7", gli ultimi due numeri si accendono ed è quindi possibile impostare i minuti. Per completare l'impostazione dell'orologio, premere "7" di nuovo.
3. Per regolare la modalità di funzionamento, premere il tasto "2". Successivamente premere il tasto "Auto on", si accende e la luce "Auto off". Poi premere il tasto "4" per impostare il tempo in cui la modalità automatica deve essere attivata con i tasti "5" e "8". Con il tasto "3", è possibile regolare il tempo in cui la modalità automatica è disabilitata. Se le spie ("12" e "13"), non si illuminano significa che il dispositivo sta funzionando in modalità manuale.
4. Impostazione dell'unità di misura della temperatura.
5. Premere il tasto "11" per selezionare l'unità di misura della temperatura. Con i tasti "5" e "8" è possibile scegliere l'unità Fahrenheit (F) o Celsius (C).
6. Impostare la temperatura desiderata. Premendo il pulsante "9" sarà possibile impostare la temperatura desiderata. Tramite i pulsanti "5" e "8" sarà possibile selezionare la temperatura desiderata.
7. Display della temperatura attuale. Premere "10" per vedere la temperatura di lavoro corrente.

BEMERKUNGEN

- Una volta attivata la modalità automatica, non sconnettere il dispositivo. Assicurarsi che l'orologio sia impostato all'ora corrente.
- Se non si utilizza la modalità automatica, assicurarsi di spegnere l'apparecchiatura dopo l'uso.
- Il dispositivo permette salvare l'ultima temperatura utilizzata.
- Prima di iniziare il trattamento, controllare la temperatura con la mano per evitare che il paziente si trovi a disagio.
- Se la pelle è danneggiata, non utilizzare questo trattamento.
- Terminato il trattamento, non gettare la paraffina se è ancora liquida. Spegnere il dispositivo, attendere che la paraffina si raffreddi e si solidifichi. Successivamente accendere nuovamente e attendere che la paraffina si scioglia un po'. In questo modo, è possibile gettare la paraffina più facilmente.
- Per ridurre il tempo di fusione, selezionare la temperatura massima. Una volta che la paraffina è completamente liquida, regolare la temperatura di conseguenza.
- Se il cavo è danneggiato o deteriorato rivolgersi al produttore o a un servizio tecnico autorizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STEMPO DE FUSIONE	30Minuten
TEMPERATURA DI LAVORO	46 - 60°
CAPACITÀ	5000 ml
POTENZA NOMINALE	200W
VOLTAGGIO NOMINALE	AC 220V ~ 240V