

LG 2004

Montascale a cingoli

L'innovazione tecnologica, l'approccio al paziente e la cura dei particolari estetici hanno negli anni determinato il successo del montascale LG2004. Oggi la nuova versione ha in se tutte le caratteristiche sviluppate in otto anni di continua progettazione ed evoluzione del prodotto. Facilità d'uso senza paragoni, grazie al sistema di manovra brevettato che consente al montascale di ruotare su se stesso e su piccoli spazi senza sforzo.

Affidabilità, grazie ad una gestione dei pesi e della meccanica che consente un notevole risparmio energetico ed una più lunga autonomia.

Tutte innovazioni in un unico prodotto per rendere più facile la quotidianità di pazienti non deambulanti.

Stairlift with tracks

Technological innovation, the approach to the patient and attention to aesthetic details are what have made the LG2004 stairway climber so successful over the years. Today the new version offers all of the characteristics developed in eight years of on-going product design and evolution. Unbeatably easy to use, thanks to the patented manoeuvring system that allows the stairway climber to spin and turn in tight spaces effortlessly.

Reliability, thanks to the management of weight and mechanics that allows considerable energy savings and longer battery backup.

All innovations in a single product to make the everyday life of wheelchair-bound patients easier.





■ Poggiatesta regolabile in altezza e schienale imbottito /
Height-adjustable headrest and padded backrest

Il nuovo doppio poggiatesta regolabile in altezza ed imbottito permettono al paziente il massimo comfort /

The new height-adjustable and padded double headrest makes offers the patient maximum comfort

■ Aggancio carrozzine salvaspazio / Space-saving
wheelchair coupling

Per ridurre l'ingombro del montascale sono stati introdotti nuovi ganci richiudibili /

New folding couplings are now available to reduce the overall footprint of the stairway climber

■ Cintura di sicurezza / Safety belt

Lunghezza min 84 cm, max 162 cm /

Length min 84 cm, max 162 cm

■ Led per punto di equilibrio /
LED for balance point



■ Appoggia ruote carrozzine salvaspazio /
Space-saving wheelchair
wheel rest





■ **Poggia testa regolabile in altezza /
Height-adjustable headrest**

Regolazione in altezza 15 cm /
15 cm height adjustment



■ **Aggancio superiore carrozzine
salvaspazio /
Space-saving wheelchair top
coupling**

Estensione di aggancio da 39 cm a 55 cm /
Coupling extension from 39 cm to 55 cm



■ **Appoggia ruote carrozzine
salvaspazio /
Space-saving wheelchair wheel rest**

Larghezza totale appoggio carrozzina 66 cm /
Total width of wheelchair rest 66 cm



■ Sblocco timone / Drawbar release

Per facilitare l'aggancio della carrozzina.
Il timone si alza con facilità e senza sforzo.
Un nuovo sistema di sgancio dall'alto,
che permette all'utente di agganciare la
carrozzina senza sforzo e senza movimenti
con i piedi /

To facilitate wheelchair coupling.
The drawbar lifts easily and effortlessly.
A new top release system that allows the
user to couple the wheelchair effortlessly
and without feet movements

360°

■ Ghiera di sicurezza / Safety ring nut


Blocco meccanico che inibisce l'azionamento
della macchina se non correttamente chiuso /
Mechanical lock that prevents the machine from
starting up if not correctly closed



Cod. A009

■ **Ruota anti ribaltamento per montascale con rampe / Anti-tipping wheel for stairway climber with ramps**

La ruota antiribaltamento è consigliata in abbinamento al montascale con le rampe modello LG2004/150/A008 / The anti-tipping wheel is recommended in combination with the stairway climber with ramps model LG2004/150/A008

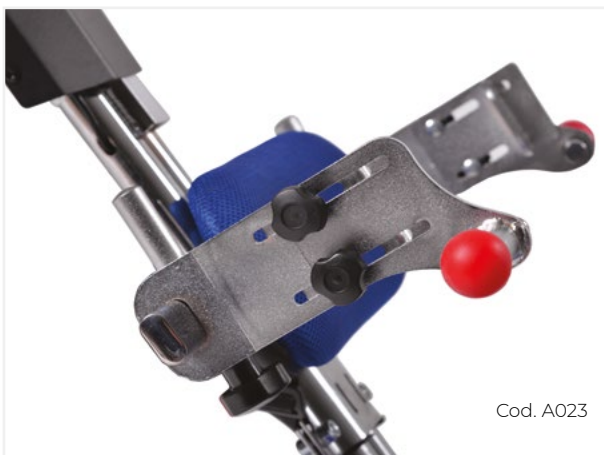

Cod. A023

■ **Aggancio carrozzina regolabile in profondità / Depth-adjustable wheelchair coupling**

Regolazione min 16 cm, max 24 cm / Adjustment min 16 cm, max 24 cm



Cod. A010

■ **Prolunghe pedane per carrozzine fuori misura / Footboard extensions for non-standard size wheelchairs**

Larghezza totale appoggio carrozzina 100 cm / Total width of wheelchair rest 100 cm

■ **Sblocco di sicurezza / Safety release**

Movimentazione manuale delle 4 ruote di sollevamento e dei cingoli in caso di emergenza / Manual movement of the 4 lifting wheels and tracks in case of emergency





- Pattini per carrozzine con ruote posteriori Ø 300 (12") /
Small ramps for wheelchairs with rear wheels Ø 300 (12")

Cod. A006




RUOTA SU SE STESSO CON FACILITA' E SENZA SFORZO / SPINS EASILY AND EFFORTLESSLY



Il montascale LG2004, e tutta la serie, ha una facilità d'uso senza paragoni grazie al **sollevamento elettrico brevettato delle 4 ruote di manovra**, che consente di ruotare su se stesso e su piccoli spazi il montascale senza sforzo /

The LG2004 stairway climber and the entire series offers unbeatably easy use thanks to the **patented electric lifting of the 4 manoeuvring wheels** that allows the stairway climber to spin and turn in tight spaces effortlessly

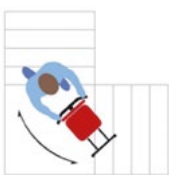

Scala dritta /
Straight staircase

TIPOLOGIE SCALE / TYPES OF STAIRS

Il montascale LG2004 e tutta la serie dei montascale a cingoli, è adatto solo per scale dritte /
The LG2004 stairway climber and the entire series of stairway climbers with tracks is only suitable for straight stairs

SERIE LG 2004 - Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso complessivo - Total weight: complessivo - Overall weight	Kg 58
Peso corpo macchina - Base equipment weight	Kg 46
Peso del timone - Drawbar weight	Kg 12
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions	144x67x99 Cm
Potenza del motore - Motor power	300 W
Potenza assorbita caricabatteria - Battery charger power supply	80 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply	100-240 V
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight	Kg 130 - (optional 150 Kg)
Percorrenza in autonomia / Distance covered in back-up	540 gradini (con passeggero di 85 Kg) 540 steps (with 85 Kg passenger)
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve	80 gradini / steps
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement	77 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L / Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing	98x98 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U / Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing	98x170 Cm
Inclinazione massima - Maximum inclination	70% - 35°
Temperatura di uso - Operating temperature	0° - 40°
Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage temperature with packaging (dry ambient)	-10° ÷ 50°
Velocità massima - Maximum speed	15 Gradini per minuto / 15 steps per minute
Dimensione imballo - Packaging dimensions	116x60x43h cm